



DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel

Ihr Partner in Sachen

- **Therapieliegen**
 - **Liegehöhe fest**
 - **elektromotorisch**
 - **hydraulisch**
 - höhenverstellbar**



**Qualität
überzeugt!**



Gymnastikliegen „Exclusive“ zur Therapie nach Bobath und Vojta



Mit elektromotorischer Höhenverstellung, bedienbar über *einen* Hand- oder Fußschalter

Grundausstattung:

- Untergestell weiß kunststoffbeschichtet
- Mit Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Höhe fahrbar/feststellbar



Modell 700-00 702-00 704-00 706-00 708-00

Länge	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Breite	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1600 mm	1400 mm
Höhe	von 430 mm bis 930 mm verstellbar				

Individuelle Maanpassungen oder Sonderwnsche auf Anfrage.

▲ Abb. mit Zubehr: Kopfteil ▼



Polster: Strapazierfhig und mit langer Lebensdauer durch:
 + Polsterbasis = mehrfach verleimte Schichtholzplatten
 + Polsterung: mit mehrlagigem Polyschaum in Raumgewicht 75.

Wir verarbeiten grundstzlich nur sortenreine KO-TEX zertifizierte Polyurethan-Schaumstoffe. Wir verarbeiten grundstzlich keinen Verbundschaum (=aufbereitetes Gemisch unterschiedlichster Schaumflocken).

Deshalb:
5 Jahre Garantie gegen Durchliegen des Polsters!

- + Kantenschutz 20 mm
- + Polsterteilstrke 60 mm

Grundstzlich gilt: Die Strke eines Polsters ist kein Qualittsindex. Aussagekraft ber die langfristig sprbare Polsterqualitt knnen nur das Raumgewicht in Verbindung mit der Art des verwendeten Schaumstoffes, wie sortenrein oder nur aufbereitet, geben.

Polsterbezug: strapazierfhig und pflegeleicht da anti-mikrobiell, anti-bakteriell, anti-mykotisch

Auswahlmglichkeit
 aus 41 aktuellen Polsterbezugsfarben – ohne Aufpreis!



Gymnastikliegen zur Therapie nach Bobath und Vojta

Präzisions-
Stahlrohrmöbel

Gymnastikliegen „Serie 2000“ Wahlweise höhenverstellbar:

- Elektromotorisch per Hand- oder Fußtaster
- Hydraulisch per Fußpedal
(Fußpedal serienmäßig beidseitig)

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
+ Weiß kunststoffbeschichtet
+ Serienmäßig feststehend,
zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten
zur Auswahl


Polster wie nebenstehend beschrieben

Modell	2800-00	2802-00	2804-00
Länge	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Breite	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Höhe	von 500 mm bis 850 mm lotrecht verstellbar (kein Seitenversatz)		

Größere Polsterbreiten siehe Modell 706 und 708.



Abb. mit Zubehör Rad-Hebe-System

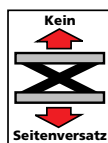

Individuelle Maßanpassungen
oder Sonderwünsche auf Anfrage.

Gymnastikliegen „Serie 4000“

Höhenverstellung elektromotorisch per Hand- oder Fußtaster.


Mit weiterentwickelter, sehr stabiler X-Konstruktion
zur lotrechten Höhenverstellung
von 420 mm bis 970 mm (ohne Seitenversatz).

- Ideal z.B. für Rollstuhlfahrer
durch die niedrige Aufstiegshöhe.
- Ideal dort, wo ein großer Verstellbereich
ergonomisch sinnvoll ist und den Therapeut
bei seiner Arbeit unterstützen kann.

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
+ Weiß kunststoffbeschichtet
+ Serienmäßig feststehend,
zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten
zur Auswahl

Polster wie nebenstehend beschrieben

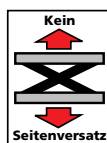


Modell	4800-00	4802-00	4804-00
Länge	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Breite	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Höhe	von 420 mm bis 970 mm lotrecht verstellbar (kein Seitenversatz)		

Größere Polsterbreiten siehe Modell 706 und 708.



▲ Abb. mit Zubehör Rad-Hebe-System ▼

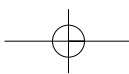

Therapie-Liegen Modell 2805-00 und Modell 4805-00 mit 2 Polstersegmenten

Individuelle Maanpassungen oder Sonderwunsche auf Anfrage.



Modell	2805-00
Lnge	1950 mm
Breite	700 mm
Hhe	von 500 mm bis 850 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

Modell 2805-00:

Wahlweise hhenverstellbar:

- **Elektromotorisch** per Hand- oder Fuschalter
- **Hydraulisch** per Fupedal (Fupedal serienmig beidseitig)
- Mit absolut lotrechter Hhenverstellung


Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder

Grundausstattung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + Wei kunststoffbeschichtet
- + Serienmig feststehend, zustzliche Ausstattungs-mglichkeiten zur Auswahl

◀ Abb. mit Zubehr Rad-Hebe-System

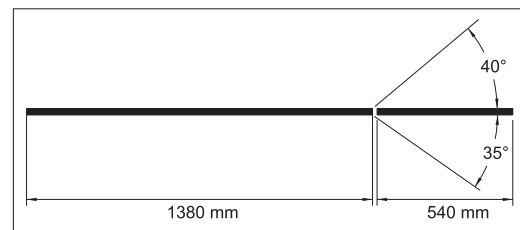

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -25°



▲ Abb. mit Zubehr: 4 einzeln feststellbare Rollen ▼

Modell 4805-00:

Wahlweise hhenverstellbar:

- **Elektromotorisch** per Hand- oder Fuschalter
- **Hydraulisch** per Fupedal (serienmig beidseitig)

Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder

Grundausstattung:


- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + Wei kunststoffbeschichtet
- + Serienmig feststehend, zustzliche Ausstattungs-mglichkeiten zur Auswahl

Polster wie auf Seite 8 beschrieben



Modell 4805-00

Lnge	2000 mm
Breite	700 mm
Hhe	elektromotorisch: 420 mm bis 970 mm verstellbar hydraulisch: 450 mm bis 900 mm verstellbar

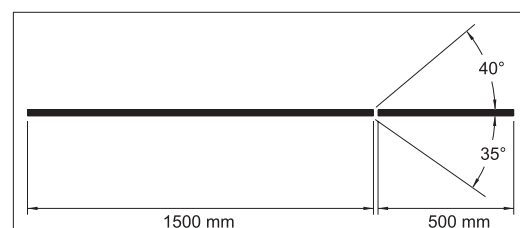

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -25°



Behandlungs- und Untersuchungsliegen Serie „ELEGANCE“

DEWERT


Präzisions-
Stahlrohrmöbel

Exclusive Comfort-Liegen mit

- ergonomisch geformter Polsterauflage
- spezieller Soft-Polsterung zur entspannten und bequemen Lagerung der Patienten
- harmonischem Design durch Verwendung von hochdimensioniertem Ovalrohr

Grundausrüstung

- Äußerst stabile Scherenkonstruktion, kein Seitenversatz
- Silber-metallic kunststoffbeschichtet
- Serienmäßig feststehend
- Pneumatisch gesteuerter AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Wahlweise mit Hand- oder Fußschalter

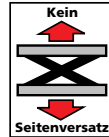

Modell 5805-00

Elektromotorisch höhenverstellbar
(kein Seitenversatz) von 450 mm - 1020 mm
Polster 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatz
- Fußteil fest

Polster

- ergonomische Form mit einer im Armbereich verbreiterten Liegefläche
- hochwertiges und komfortables Soft-Polster mit langer Lebensdauer
- Polsterstückstärke 70 mm mit 20 mm Kantenschutz


Polsterbezug

- Auswahlmöglichkeit aus 41 Polsterfarben
- ohne Aufpreis




Modell 5805-00

Länge	2000 mm
Breite	trapezförmig verlaufend von 600 mm (Kopfteilanfang) bis 790 mm (Mitte Fußteil) zu 650 mm (Fußteilende)
Höhe	elektromotorisch: 450 mm bis 1020 mm

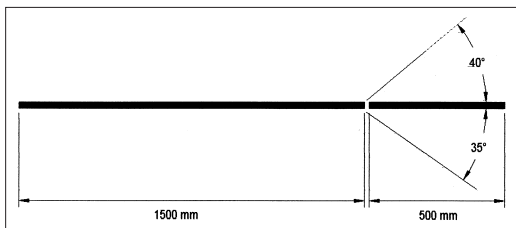

Negativlage
bei Option
3-teiliges
Kopfteil
max. -25°

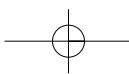

Therapie-Liegen mit 2 Polstersegmenten und zusätzlichem Verlängerungsteil



Abb. mit Zubehör: 4 einzeln feststellbare Rollen



Modell 2806-00:

Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder bzw. senkrecht abklappbar

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + Weiß kunststoffbeschichtet
- + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl


Polster wie auf Seite 8 beschrieben

Modell 2806-00


Gesamtlänge: 1950 mm, bei Kopfteil abgeklappt: 1550 mm

Breite: 700 mm

Höhe: **von 530 mm bis 880 mm verstellbar**
(kein Seitenversatz)

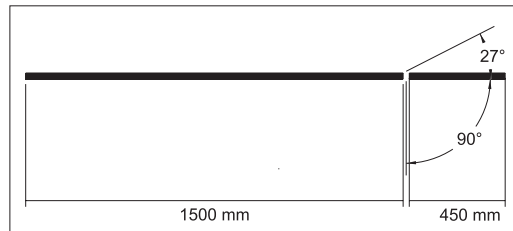

Für beide Modelle gilt:

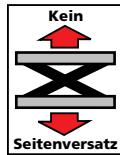

Wahlweise Höhenverstellbar:

- Elektromotorisch per Hand- oder Fußschalter
- Hydraulisch per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)



Polster wie auf Seite 8 beschrieben

Individuelle Maßanpassungen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.

Modell 2808-00:

Polster 3-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Fußteilverlängerung (oder 2. Kopfteil) positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder bzw. senkrecht abklappbar

Grundausrüstung:


- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + Weiß kunststoffbeschichtet
- + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

Modell 2808-00

Gesamtlänge: 2190 mm, Verlängerung abgeklappt: 1790 mm

Breite: 700 mm

Höhe: **von 530 mm bis 880 mm verstellbar**
(kein Seitenversatz)

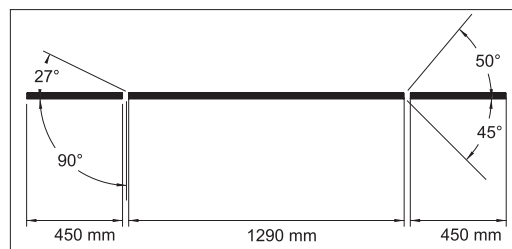

Therapie-Liegen mit 2 Polstersegmenten und neigbarer Liegefläche zur Extension

Modell 2910-00 (s.Abb.): Elektromotorisch höhenverstellbar. Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Liegefläche neigbar bis ca. 35° durch 2. Elektromotor zur Extension

Die motorische Verstellung der Liegefläche wird über einen Handschalter gesteuert

Standard:

Mit seitlichem Aufhängebügel für den Handtaster

Standard:

Mit Einsteckvorrichtung für Extensionsgalgen

Grundausrüstung:


- Untergestell:
 - + Sehr stabile Scheren-(X)-konstruktion
 - + Weiß kunststoffbeschichtet
 - + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsöglichkeiten zur Auswahl
- Polster wie auf Seite 8 beschrieben



Abb. mit Zubehör: Extensionsgalgen



Modell	2910-00
Länge	1950 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 560 mm bis 910 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

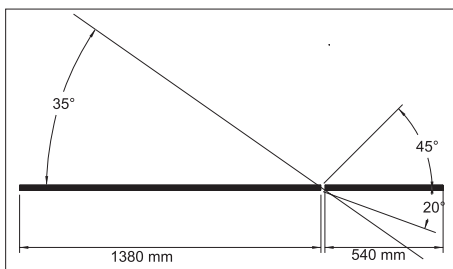


Modell 2810-00/H (ohne Abb.): Hydraulisch höhenverstellbar / Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Liegefläche neigbar (Trendelenburg) durch Gasdruckfeder bis ca. 14°


Modell	2810-00/H
Länge	2000 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 580 mm bis 910 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-konstruktion
- + Weiß kunststoffbeschichtet
- + Serienmäßig feststehend

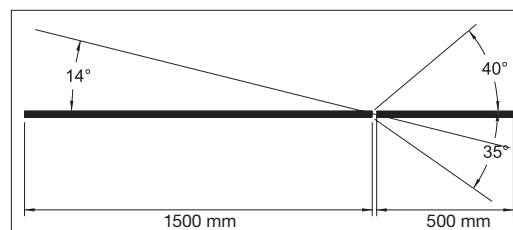

Therapie-Liege Modell 2815-00 mit 3 Polstersegmenten

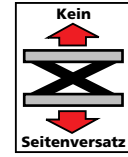

Wahlweise Höhenverstellbar:
 - **Elektromotorisch** per Hand- oder Fußschalter
 - **Hydraulisch** per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)



Alle Abb. mit Zubehör:
beidseitiger Fußbetätigungsrahmen, 3-teiliges Kopfteil



Modell 2815-00: Polster 3-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil fest
- Fußteil als Rückenteil stufenlos positiv bis zur Sitzposition durch Gasdruckfeder verstellbar

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + Weiß kunststoffbeschichtet
- + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsöglichkeiten zur Auswahl

Polster: Strapazierfähig und mit langer Lebensdauer durch:
 + Polsterbasis = mehrfach verleimte Schichtholzplatten
 + Polsterung: mit mehrlagigem Polyschaum in Raumgewicht 46 und 75.

Wir verarbeiten grundsätzlich nur sortenreine ÖKO-TEX zertifizierte Polyurethan-Schaumstoffe. Wir verarbeiten grundsätzlich keinen Verbundschaum (=aufbereitetes Gemisch unterschiedlichster Schaumflocken).

Deshalb:

5 Jahre Garantie gegen Durchliegen des Polsters!

- + Kantenschutz 20 mm
- + Polsterteilstärke 60 mm

Grundsätzlich gilt: Die Stärke eines Polsters ist kein Qualitätsindex. Aussagekraft über die langfristig spürbare Polsterqualität können nur das Raumgewicht in Verbindung mit der Art des verwendeten Schaumstoffes, wie sortenrein oder nur aufbereitet, geben.


Polsterbezug: strapazierfähig und pflegeleicht da anti-mikrobiell, anti-bakteriell, anti-mykotisch

Auswahlmöglichkeit

aus 41 aktuellen Polsterbezugsfarben – ohne Aufpreis!

Modelle 2815-00

Länge	1950 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 530 mm bis 880 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

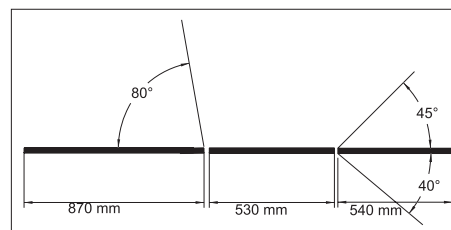

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°

Individuelle Maßanpassungen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.



Therapie-Liege Modell 4815-00 mit 3 Polstersegmenten

Höhenverstellbar elektromotorisch

Mit weiterentwickelter, sehr stabiler X-Konstruktion
Wahlweise höhenverstellbar:

- Elektromotorisch per Hand- oder Fußschalter
- Hydraulisch per Fußpedal (serienmäßig beidseitig)

Ideal dort, wo ein großer Verstellbereich und eine niedrige Aufstiegshöhe ergonomisch sinnvoll sind und den Therapeut bei seiner Arbeit unterstützen.

Modell 4815-00:

Polster 3-teilig:

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil fest
- Fußteil als Rückenteil stufenlos positiv bis zur Sitzposition verstellbar durch 2 Gasdruckfedern
Zum Bedienen der Gasdruckfedern ist ein umlaufender Auslösebügel vorhanden.
Dadurch ist auch eine seitliche Bedienung möglich.

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scherenkonstruktion
- + Weiß kunststoffbeschichtet
- + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl


Polster wie nebenstehend beschrieben

Sonderausstattung für Modell 4815-00:

- Fußteil auch längsgeteilt möglich.

DEWERT


Präzisions-
Stahlrohrmöbel

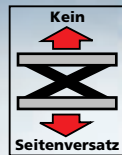

Alle Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System, 3-teiliges Kopfteil




Modell	4815-00
Länge	1970 mm
Breite	700 mm
Höhe	elektromotorisch: 450 mm bis 1000 mm verstellbar
	hydraulisch: 480 mm bis 930 mm verstellbar

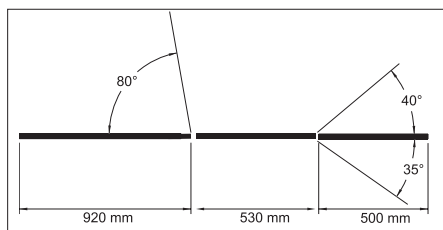


Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°

Individuelle Maßanpassungen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.

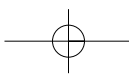

Therapie-Liege mit 3 verstellbaren Polstersegmenten Modell 2830-00

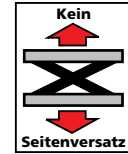

Wahlweise Höhenverstellbar:
 - **Elektromotorisch** per Hand- oder Fußschalter
 - **Hydraulisch** per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)



▲ Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System, Fußauslöserahmen, Kopfteil 3-teilig, Gurtführungsschienen

Modell 2830-00:

Polster 3-teilig:

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar
- Fußteil stufenlos positiv verstellbar

Durch Positionierung aller Einzelsegmente ist eine Gesamtschräglage (Trendelenburg) der Liegefläche möglich

Grundausstattung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
 + Weiß kunststoffbeschichtet
 + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsöglichkeiten zur Auswahl

Modell 2830-00

Länge 1950 mm


Breite 700 mm

Höhe **von 530 mm bis 880 mm verstellbar (kein Seitenversatz)**



Abb. Grundausstattung mit Sperrbox 1995

- ▼ Wie Bild 1, zusätzlich Papierrollenhalter, Schulterfixierstützen, Befestigungsgurt, Gurtpolster

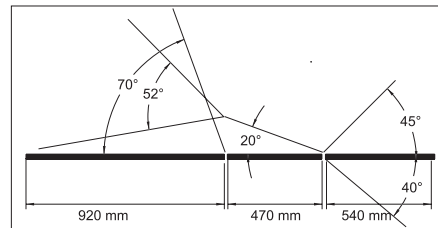

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°

Individuelle Maßanpassungen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.

Polster: Strapazierfähig und mit langer Lebensdauer durch:

- + Polsterbasis = mehrfach verleimte Schichtholzplatten
- + Polsterung: mit mehrlagigem Polyschaum in Raumgewicht 46 und 75.

Wir verarbeiten grundsätzlich nur sortenreine ÖKO-TEX zertifizierte Polyurethan-Schaumstoffe. Wir verarbeiten grundsätzlich keinen Verbundschaum (=aufbereitetes Gemisch unterschiedlichster Schaumflocken).

Deshalb:

5 Jahre Garantie gegen Durchliegen des Polsters!

- + Kantenschutz 20 mm
- + Polsterteilstärke 60 mm

Grundsätzlich gilt: Die Stärke eines Polsters ist kein Qualitätsindex. Aussagekraft über die langfristig spürbare Polsterqualität können nur das Raumgewicht in Verbindung mit der Art des verwendeten Schaumstoffes, wie sortenrein oder nur aufbereitet, geben.

Polsterbezug: strapazierfähig und pflegeleicht da anti-mikrobiell, anti-bakteriell, anti-mykotisch

Auswahlmöglichkeit

aus 41 aktuellen Polsterbezugsfarben – ohne Aufpreis!

Therapie-Liege mit 3 verstellbaren Polstersegmenten Modell 4830-00

Höhenverstellbar elektromotorisch

Mit weiterentwickelter, sehr stabiler X-Konstruktion zur lotrechten Höhenverstellung.

Wahlweise höhenverstellbar:

- Elektromotorisch per Hand- oder Fußschalter
- Hydraulisch per Fußpedal (serienmäßig beidseitig)

Ideal dort, wo ein großer Verstellbereich und eine niedrige Aufstieghöhe ergonomisch sinnvoll sind und den Therapeut bei seiner Arbeit unterstützen.

Modell 4830-00:

Polster 3-teilig:


- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar
- Fußteil stufenlos positiv verstellbar

Durch Positionierung aller Einzelsegmente Gesamtschräglage der Liegefläche möglich (Trendelenburg)

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + Weiß kunststoffbeschichtet
- + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

Polster wie nebenstehend beschrieben

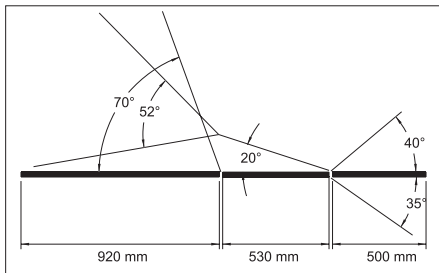

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°

Modell 4830-00

Länge 1970 mm

Breite 700 mm

Höhe **elektromotorisch: 490 mm bis 1010 mm verstellbar**

hydraulisch: 480 mm bis 930 mm verstellbar


Individuelle Maßanpassungen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.



Alle Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System, zentral verstellbar, Kopfteil mit durchgehendem Nasenschlitz



Therapie-Liege mit 3 verstellbaren Polstersegmenten Modell 2890-00

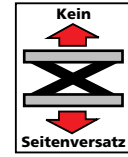

Wahlweise Höhenverstellbar:
 - **Elektromotorisch** per Hand- oder Fußschalter
 - **Hydraulisch** per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)



Modell 2890-00:

Polster 3-teilig:

- Kopfteil positiv (40°) und negativ (-35°) verstellbar
 - Mittelteil positiv (45°) und negativ (-15°) verstellbar
 - Fußteil positiv (50°) und negativ (-15°) verstellbar
- Alle Einzelsegmente sind verstellbar durch Gasdruckfedern

Durch die verschiedenen Positionierungsmöglichkeiten sind Dachstellung, Trendelenburg- sowie Anti-Trendelenburg möglich

Abmessungen der Polstersegmente:

- Kopfteil: 420 mm
- Mittelteil: 550 mm
- Fußteil: 970 mm

Grundausstattung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + Weiß kunststoffbeschichtet
- + Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

▲ Abb. mit Zubehör: 4 einzeln feststellbare Rollen ▼▼



Modell 2890-00

Länge	1950 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 570 mm bis 920 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

Polster: Strapazierfähig und mit langer Lebensdauer durch:

- + Polsterbasis = mehrfach verleimte Schichtholzplatten
- + Polsterung: mit mehrlagigem Polyschaum in Raumgewicht 46 und 75.

Wir verarbeiten grundsätzlich nur sortenreine ÖKO-TEX zertifizierte Polyurethan-Schaumstoffe. Wir verarbeiten grundsätzlich keinen Verbundschaum (=aufbereitetes Gemisch unterschiedlichster Schaumflocken).

Deshalb:

5 Jahre Garantie gegen Durchliegen des Polsters!

- + Kantenschutz 20 mm
- + Polsterteilstärke 60 mm

Grundsätzlich gilt: Die Stärke eines Polsters ist kein Qualitätsindex. Aussagekraft über die langfristig spürbare Polsterqualität können nur das Raumgewicht in Verbindung mit der Art des verwendeten Schaumstoffes, wie sortenrein oder nur aufbereitet, geben.

Polsterbezug: strapazierfähig und pflegeleicht da anti-mikrobiell, anti-bakteriell, anti-mykotisch

Auswahlmöglichkeit

aus 41 aktuellen Polsterbezugsfarben – ohne Aufpreis!



Individuelle Maßanpassungen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.

Therapie-Liege mit 4 verstellbaren Polstersegmenten Modell 2895-00

Höhenverstellbar ohne Seitenversatz

Wahlweise

Höhenverstellbar:

- **Elektromotorisch**
per Hand- oder Fußschalter
- **Hydraulisch** per Fußpedal
(Fußpedal serienmäßig
beidseitig)

Modell 2895-00:

Polster 4-teilig:

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil positiv (40°) und negativ (-35°) verstellbar
- Mittelteil positiv (45°) und negativ (-15°) verstellbar
- Fußteil 2-teilig, quergestellt:
 1. Teil positiv (50°) und negativ (-15°) verstellbar
 2. Teil positiv (35°) und negativ (-30°) verstellbar

Alle Einzelsegmente sind verstellbar durch Gasdruckfedern

Durch die verschiedenen Positionierungsmöglichkeiten sind Dachstellung, Trendelenburg- sowie Anti-Trendelenburg möglich

Abmessungen der Polstersegmente:

- Kopfteil: 420 mm
- Mittelteil: 550 mm
- Fußteil: 1. Teil: 550 mm
2. Teil: 420 mm

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-konstruktion
+ Weiß kunststoffbeschichtet
+ Serienmäßig feststehend,
zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten
zur Auswahl

Polster wie auf Seite 12 beschrieben

Modell	2895-00
Länge	1950 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 570 mm bis 920 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

Sonderzubehör für

Modelle 2890-00 und 2895-00

- Kopfteil 3-teilig, mit absenk- und abnehmbaren Armstützen (Ident-Nr. 056)
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen 75 mm diam. dadurch Höhe: 640-990 mm (Ident-Nr. 040)
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen 75 mm diam. Untergestell tiefer gesetzt, dadurch: Höhe: 570-920 mm (Ident-Nr. 041)



Mit Auswahlmöglichkeit aus 41 aktuellen Polsterbezugfarben
– ohne Aufpreis

Therapie-Liege mit 4 verstellbaren Polster-Segmenten Modell 2850-00 und Modell 2860-00

Höhenverstellbar ohne Seitenversatz



Höhenverstellung elektromotorisch

Mit Zubehör: Fahrbar auf Rollen mit Zentralfeststellsystem



Modell 2850-00:

Polster 4-teilig:

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar
- Fußteil 2-teilig (quergeteilt):
Die gesamte Fußteilfläche ist positiv verstellbar
Das geteilte Fußteil kann in Dachstellung gebracht werden (Verstellung des hinteren Segmentes durch 2 Gasdruckfedern)
Durch Positionierung der Einzelsegmente ist eine Gesamtschräglage der Liegefläche möglich (Trendelenburg).


Grundausstattung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
+ Weiß kunststoffbeschichtet
+ Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

Polster wie auf Seite 12 beschrieben


Modell 2850-00

Länge	1950 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 530 mm bis 880 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

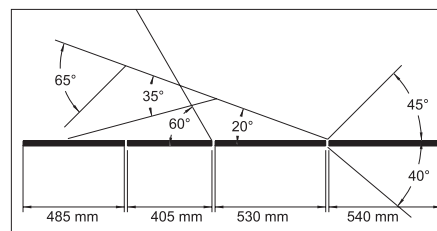

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°

Für beide Modelle gilt:

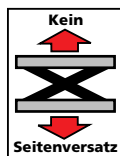

Wahlweise Höhenverstellbar:
- **Elektromotorisch** per Hand- oder Fußschalter
- **Hydraulisch** per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)



Höhenverstellung hydraulisch

▲ Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System, Kopfteil 3-teilig


Modell 2860-00:

Wie Modell 2850-00, jedoch:

- Fußteil längsgeteilt: Jedes Fußsegment kann einzeln stufenlos positiv verstellbar werden

Modell 2860-00

Länge	1950 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 530 mm bis 880 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

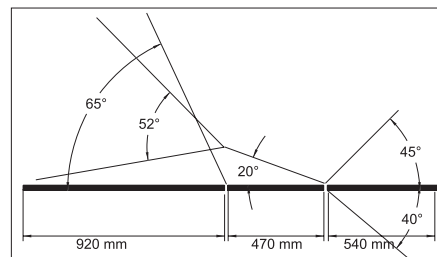

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°

Individuelle Maßanpassungen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.

Therapie-Liege mit 6 verstellbaren Polstersegmenten Modell 2880-00

Höhenverstellbar ohne Seitenversatz

Wahlweise

Höhenverstellbar:

- **Elektromotorisch**
per Hand- oder Fußschalter
- **Hydraulisch** per Fußpedal
(Fußpedal serienmäßig
beidseitig)

Abb. mit Zubehör: Fußauslöserahmen, Rad-Hebe-System, 2 seitl. Armstützen, schwenk-/höhenverstellbar bzw. herausnehmbar



Modell 2880-00:

Polster 6-teilig:


- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar
- Fußteil 4-teilig (quer- und längsgeteilt):
Die gesamte Fußteilfläche ist positiv verstellbar
Jedes Beinsegment kann in sich verstellt und in Dachstellung gebracht werden
(Verstellung der hinteren Segmente durch Gasdruckfedern)
Durch Positionierung der Einzelsegmente ist eine Gesamtschräglage der Liegefläche möglich (Trendelenburg).

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-konstruktion
+ weiß, kunststoffbeschichtet
+ Serienmäßig feststehend,
zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

Polster wie auf Seite 12 beschrieben

Modell	2880-00
Länge	1950 mm
Breite	700 mm
Höhe	von 530 mm bis 880 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

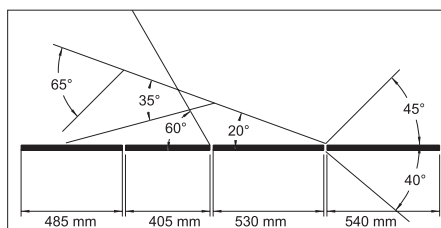

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°

Abb. mit Zubehör: Kopfteil 3-teilig, Rad-Hebe-System,



Mit Auswahlmöglichkeit aus 41 aktuellen Polsterbezugfarben – ohne Aufpreis

Stehbrett Modell 900-00

Mit stufenloser elektromotorischer Kippverstellung der Liegefläche von der aufrechten Position (+85°) über die horizontale Lage bis zur Negativneigung (ca. -15°).

Modell 900-00

Untergestell weiß kunststoffbeschichtet

Serienmäßige Ausstattung:

- Liegefläche einteilig
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen
- Fußplatte abnehmbar
- Seitliche Befestigungsschienen für Zubehör
- Hand- und Fußschalter zur Bedienung der Kippverstellung
- Einsteckvorrichtung für Extensionsgalgen

Abmessungen der Liegefläche:

Länge: 1950 mm (ohne Fußstütze)

Breite: 700 mm


Höhe: 700 mm (bei horizontaler Liegefläche)

Sonderzubehör für Modell 900-00 siehe Seite 17



②

Abb. mit Sonderzubehör

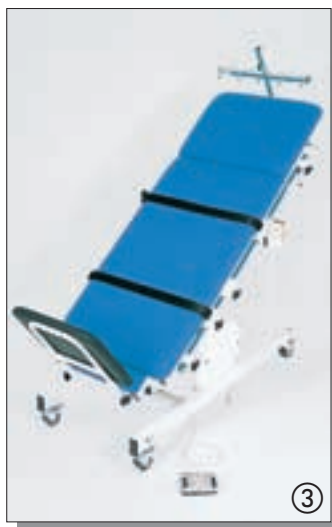

③



④



①

Abb. mit Sonderzubehör

Die Gesamt-Kippverstellung von +85° bis -15° erfolgt in ca. 18 sec., auch unter normaler Belastung. Das Stehbrett ist nicht höhenverstellbar.

Polster: Strapazierfähig und mit langer Lebensdauer durch:
 + Polsterbasis = mehrfach verleimte Schichtholzplatte
 + Polsterung: mit mehrlagigem Polyschaum in Raumgewicht 75.

Wir verarbeiten grundsätzlich nur sortenreine ÖKO-TEX zertifizierte Polyurethan-Schaumstoffe. Wir verarbeiten grundsätzlich keinen Verbundschaum (=aufbereitetes Gemisch unterschiedlichster Schaumflocken)

Deshalb:
5 Jahre Garantie gegen Durchliegen des Polsters!
 + Kantenschutz 20 mm
 + Polsterteilstärke 60 mm

Grundsätzlich gilt: Die Stärke eines Polsters ist kein Qualitätsindex. Aussagekraft über die langfristig spürbare Polsterqualität können nur das Raumgewicht in Verbindung mit der Art des verwendeten Schaumstoffes, wie sortenrein oder nur aufbereitet, geben.

Polsterbezug: strapazierfähig und pflegeleicht da anti-mikrobiell, anti-bakteriell, anti-mykotisch
 Mit Auswahlmöglichkeit aus 41 aktuellen Polsterbezugsfarben – ohne Aufpreis!

Stehbrett Modell 2900-00

Mit elektromotorischer Höhen- und Kippverstellung, unabhängig von einander in jeder Position.

Stufenlose elektromotorische Kippverstellung der Liegefläche von der horizontalen in die fast senkrechte Position (+ 85°).

Modell 2900-00

Elektromotorisch höhenverstellbar von 580 mm bis 900 mm.

Serienmäßige Ausstattung:

- Liegefläche einteilig
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen
- Fußplatte abnehmbar
- Seitliche Befestigungsschienen für Zubehör
- Handschalter zur Bedienung der Kippverstellung
- Fußschalter zur Bedienung der Höhenverstellung
- Einsteckvorrichtung für Extensionsgalgen

Abmessungen der Liegefläche:

Länge: 1950 mm (ohne Fußstütze)

Breite: 700 mm

Höhe: Liegefläche horizontal:
von 580 mm bis 900 mm verstellbar

Sonderzubehör für Stehbretter

Modelle 900-00 und 2900-00:

- 1 Paar Haltegriffe klein (S. 16, Abb. 1)
- 1 Paar Haltegriffe groß (Abb. 1)
- Gurtführungen für Befestigungsgurt (S. 16, Abb. 1)
- Befestigungsgurt (S. 16, Abb. 1)
- Polster für Befestigungsgurt (ohne Abb.)
- Arbeitsplatte (S. 16, Abb. 4)
- Arbeitsplatte positiv und negativ verstellbar (S. 16, Abb. 1)
- Kopfteil positiv verstellbar (Abb. 3)
- Fußstütze motorisch positiv/negativ verstellbar, dann nicht mehr abnehmbar (S. 16, Abb. 2)
- Kopfteil positiv/negativ verstellbar durch Gasdruckfeder (dadurch Entfall der Einsteckvorrichtung für Extensionsgalgen – nur Modell 900-00, s. S. 16, Abb.2)

DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel



Abb. mit Sonderzubehör

Die Gesamt-Kippverstellung von 0° bis + 85° erfolgt in ca. 18 Sec., auch unter normaler Belastung. Unabhängig von der eingestellten Neigung der Liegefläche ist eine elektromotorische Höhenverstellung möglich.



Abb. mit Sonderzubehör



Abb. mit Sonderzubehör



Osteopathie-Liege Modell 4300-00

DEWERT

 Präzisions-
Stahlrohrmöbel

Höhenverstellbar elektromotorisch

Mit weiterentwickelter, sehr stabiler X-Konstruktion zur lotrechten Höhenverstellung elektromotorisch von 420 mm bis 970 mm (ohne Seitenversatz)

Ideal dort, wo ein großer Verstellbereich und eine niedrige Aufstiegshöhe ergonomisch sinnvoll sind und den Therapeut bei seiner Arbeit unterstützen.

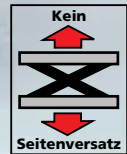


Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System, Kopfteil 3-teilig

Modell 4300-00:

- Kopfteil, einteilig, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Fußteil fest
- Mit 2 seitlichen, abklappbaren Armteilen (ca. 120 mm breit) im 1. Drittel des Fußteiles
Hier ebenso Verjüngung des Polsters (zur Erleichterung des Kontaktes zwischen Patient und Therapeut).
- Serienmäßig mit Fußteilverlängerungs- (ca. 100 mm) bzw. Hochlagerungsmöglichkeit (ca. 150 mm) Bei Nichtgebrauch auch abnehmbar.

Grundausrüstung:

- Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-konstruktion
+ Weiß kunststoffbeschichtet
+ Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl


41 aktuelle Polsterbezugsfarben stehen Ihnen zur Auswahl – eine Farbauswahl ohne Aufpreis –



Sonderzubehör:


- Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Höhe fahr-/feststellbar
- 4 einzeln feststellbare Rollen, 100 mm Ø
- Kopfteil 3-teilig, mit stufenlos absenkbar Armstützen, auch abnehmbar

Modell	4300-00
Länge	2050 mm
Breite	(ohne seittl. Armstützen): Kopfteil bis 1/3 des Fußteiles: 570 mm, dann: 650 mm
Höhe	von 420 mm bis 970 mm verstellbar (kein Seitenversatz)

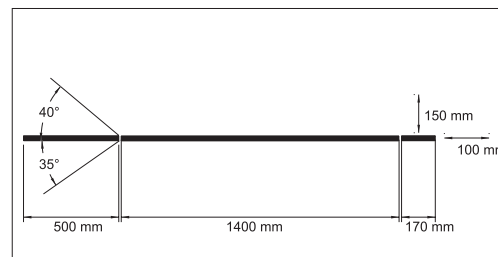

Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -25°

Bei elektromotorisch verstellbaren Liegen: Sicherheitssperbox zum Schutz vor unbefugter Betätigung (BfArM, 2.08.2004). Wählen Sie zwischen 2 Ausführungen! (Sehen Sie Katalog, Seite 20, Bild 16 + 17)

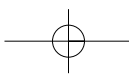

Sonderzubehör



Präzisions-
Stahlrohrmöbel

Abb.	Sonderzubehör	Modelle											
		700-708	2800-2804	4800-4804	2805-00	4805-00	2808-00 2806-00	2910-00 2810-00	2815-00	4815-00	2830-00	4830-00	2880-00 2860-00 2850-00
1	4 Rollen, einzeln feststellbar	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Rad-Hebe-System, in jeder Höhe fahr-/feststellbar	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	4 Rollen zentral feststellbar	-	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
4	Durchgehender Nasenschlitz mit Abdeckpolster	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Kopfteil 3-teilig, mit absenk-/abnehmbaren Armstützen	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X
6	zusätzlich: Armstützen dreh- und kippbar	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X
	zusätzlich: Kopfteil 3-teilig, 700 mm lang	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X
	Kopfteil 1-teilig, 700 mm lang	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
	Kopfteil positiv verstellbar durch 2 Raster (ca. + 30°)	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kopfteil positiv verstellbar durch Gasdruckfeder (ca. 70°)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kopfteil positiv und negativ verstellbar durch Gasdruckfeder	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1 seitliche Armstütze, schwenk- abnehmbar, ggf. dreh- und kippbar	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Extensionsgalgen, verchromt mit Einsteckvorrichtung	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-
9	1 Paar Gurtführungen, Befestigungsgurt, Gurtschutzpolster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Eingepolsterter Fixierpunkt, Fixierstütze, Schulterfixierstütze mit Halterung	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Zusätzlicher Hand- oder Fußschalter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Fußauslöserahmen zur Bedienung von jeder Stelle der Liege aus (verchromt)	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
13	Fußauslöserahmen, längsseitig auch nachrüstbar	-	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
14	Fußschalter fixiert am Untergestell	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Papierrollenhalter	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
18	Rad-Hebe-System mit ruckfreier Absenkvorrichtung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

S = Serienausstattung / X = Ausstattung optional möglich / - Ausstattung nicht standardmäßig lieferbar

...ein Querschnitt aus unserem Sonderzubehör

(modellabhängig siehe Seite 19)



4 einzeln feststellbare Laufrollen



Rad-Hebe-System mit ruckfreier Absenkvorrichtung (Nr. 047)



4 Rollen, zentral feststellbar



Schulterfixierstütze



Fixierstütze/-punkt



Papierrollenhalter



Rad-Hebe-System, in jeder Höhe fahr-/feststellbar



Gurt-Polster/-führung



Durchgehender Nasenschlitz Papierrollenhalter



Umlaufender Fußauslöserahmen, verchromt



Kopfteil, 3-teilig




Armstützen, dreh-/kipubar



Längsseitiger Fußbetätigungsrahmen, auch nachrüstbar



Armauflage/seitlich

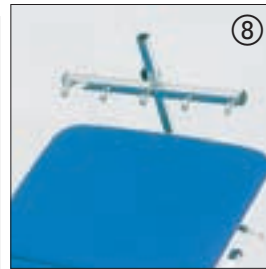

Extensionsgalgen



Fußschalterfixierung



Handschalter




Sperrbox Nr. 1995



Sperrbox Nr. 1993

Bitte prüfen Sie anhand der nebenstehenden Übersicht, ob Ihr Wunschzubehör für Ihr Modell standardmäßig lieferbar ist.

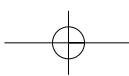

Farbmuster-Karte



56029




56009



56068



56012



56083



56079



56076



56051



56052



56080



56082



56006



56007



56042



56008



56054



56053



56081



56056



56078



56075



56034



56057



56066



56037



56084



56077



56048



56049



56036



56061



56041



56050



56085



56021



56032



56019



56022



56040



56023



56024

Stamskin top® erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz im Krankenhaus- und Pflegebereich:

Schutz gegen Schimmelbildung:
Stamskin top® ist antibakteriell-fungizid behandelt und daher gegen Schimmelbildung geschützt

Wasserdicht:
Stamskin top® ist wasserundurchlässig

Reinigung und Pflege:
von Stamskin top® ist problemlos


Feuerbeständig: Stamskin top® ist entsprechend den gültigen europäischen Brandschutznormen eingestuft:

CH: (Zertifikat N° 6625) VKF/AEAI: 5,3
D : DIN 53438/T2, Class K1/1,1 mm
A : ÖNORM B 3800/T2:Class B1
F : NFP 92.507: M2

USA: Complies US Standards
UFAC Fabric – CA 117 E
FAA-Horizontal – FMVSS 302
BFD IX-1
BIFMA X 5.7 Fab Screen RC

Zigarettentest/Streichholztest:
Kein Entflammen
D2-2000 du GPEM/CP
NF EN 1021.1
NF EN 1021.2

Änderungen von Abmessungen, technischen Angaben und technischen Eigenschaften oder die Streichung von Produkten behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Aus drucktechnischen Gründen können Abweichungen zwischen abgebildeten Farben und Original möglich sein.

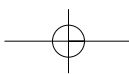

Fachhandel:



K. H. Dewert GmbH · Vollmestraße 7 · D-33649 Bielefeld
Postfach 144028 · D-33634 Bielefeld · Germany
Telefon +49(0)521/40027-0 · Fax +49(0)521/40027-27
Internet: www.khdewert.de · E-Mail: khdewert@t-online.de

1/Gie/07/2009